


ACTIVOMED

Impulse-Line
Terapia światłem WLP

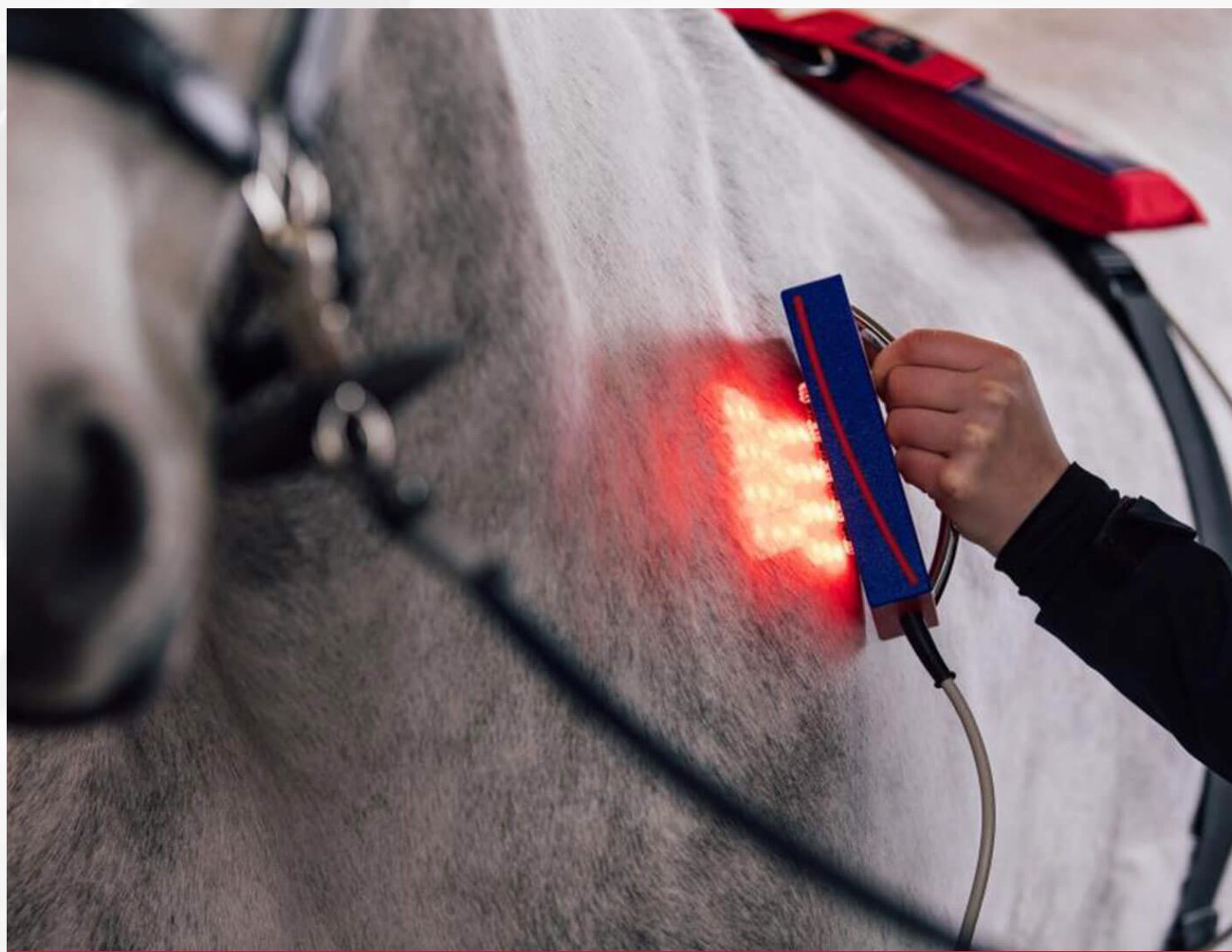

Łączona terapia Wave-Light-Pulse

Wskazanie	Czas (t)	Częst. (F)	Intens. (I)	Poziom (L)	Komentarz
Świeże (ostre) rany bezpośrednio po urazie	2 min	4 Hz	4	3	2 do 3 razy dziennie + 5 minut PMF
Ciężko gojące się, otwarte rany	1 min	15 Hz	8	12	2 do 3 razy dziennie
Na początku procesów gojenia się ran	1 min	8 Hz	8	6	2 do 3 razy dziennie
Gojenie ran w zaawansowanym stadium	1 min	15 Hz	10	12	2 do 3 razy dziennie
Ostry stan zapalny mięśni	1 min	6 Hz	10	2	2 do 3 razy dziennie
Przewlekłe stany zapalne mięśni	1 min	15 Hz	10	12	2 do 3 razy dziennie
Stan zapalny mięśni, początek gojenia się włókien	1 min	10 Hz	10	12	2 do 3 razy dziennie
Stan zapalny mięśni, zaawansowane stadium gojenia się włókien	2 min	8 Hz	10	6	4 razy dziennie
Nagromadzenie płynów pod skórą	1 min	12 Hz	8	12	4 razy dziennie
Nagromadzenie płynu w stawach	1 min	15 Hz	10	12	4 razy dziennie
Ostry ból	1 min	4 Hz	6	6	2 razy dziennie
Przewlekły ból	1 min	8 Hz	10	10	2 razy dziennie

Uwaga: Wszystkie zalecane informacje są oparte na praktycznych doświadczeniach. Powinieneś zdecydowanie obserwować zwierzę i dokładnie diagnozować zmiany. Długotrwałe leczenie nie powinno odbywać się bez porady weterynaryjnej.

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny +48 796 333 562

Poziom WLP i częstotliwości w jednostce sterującej

Poziom (L)	Częstotliwość (F)		Poziom (L)	Częstotliwość (F)		Poziom (L)	Częstotliwość (F)
1	1 Hz		6	50 Hz		11	1500 Hz
2	2 Hz		7	100 Hz		12	2000 Hz
3	5 Hz		8	200 Hz		13	2500 Hz
4	10 Hz		9	500 Hz		14	5000 Hz
5	20 Hz		10	1000 Hz		-	-

Ustawianie parametrów WLP w menu jednostki sterującej


Przykładowe ustawianie parametrów terapii WLP w programie **P 01**

1. Przewiń do ekranu **P 01** za pomocą przycisku **[Blättern/Page]**.
2. Wybierz program **P 01** za pomocą przycisku **[Zählen/Count]**.
3. Naciśnij przycisk **[Ändern/Change]**
4. Przewiń do ekranu **L XX** (XX cyfra na ekranie) za pomocą przycisku **[Blättern/Page]**.
5. Wybierz poziom częstotliwości światła za pomocą przycisku **[Zählen/Count]** na **L = 01-14**. Oznacza to, że poziom częstotliwości zgodny z tabelą został aktywowany.
Ważne! Dla aktywacji leczenia łączonego jest to ustawienie o wartości ≥ 1
6. Przewiń do ekranu **F XX** (XX cyfra na ekranie) za pomocą przycisku **[Blättern/Page]**.
7. Wybierz częstotliwość za pomocą przycisku **[Zählen/Count]** na **F = 01-15**.
Ważne! Dla aktywacji leczenia łączonego jest to ustawienie o wartości ≥ 1
8. Przewiń do ekranu **+ XX** (XX cyfra na ekranie) za pomocą przycisku **[Blättern/Page]**.
9. Wybierz czas za pomocą przycisku **[Zählen/Count]**. Ustaw czas zgodnie z zaleceniami.
10. Naciśnij przycisk **[Ändern/Change]**, a parametry zostaną zapisane. Teraz parametry dla programu **P 01** są ustawione.
11. Jeśli teraz naciśniesz przycisk **[Start/Stop]**, program się uruchomi.

Ważne! Kabel zasilający do urządzenia WLP musi być podłączony do gniazda WLP, w innym przypadku sterowanie nie będzie działało!


Strefy terapii na ciele i kończynach

1. Pozostań 1 min na każdym punkcie, zachowując odstęp 2-3 cm nad zranionym/napiętym mięśniem. Jeśli leczona jest górna część kręgu szyjnego, pozostań nad nią co najmniej 2 min pomiędzy poszczególnymi kręgami. Podczas pracy z WLP należy przez 1 min działać w dowolnym punkcie powyżej obszaru obrażeń. Wybierz lokalizację w taki sposób, aby zapewnić leczenie zakresowe.
2. Pozostań 1 min na każdym punkcie, zachowując odstęp 2-6 cm nad zranionym/napiętym mięśniem. W przypadku terapii kręgosłupa pozostań przynajmniej 1 min pomiędzy poszczególnymi kręgami. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym/napiętym mięśniem przez co najmniej 1 min.
3. Pozostań 1 min na każdym punkcie. Pozostań w okolicy barku/ stawu barkowego w 3 punktach: z przodu, z boku i z tyłu. W przypadku napiętych mięśni barku trzymaj się w zakresie małych 2-4 cm kroków nad napiętymi mięśniami. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym/napiętym mięśniem przez co najmniej 1 min.
4. Pozostań 1-2 min na każdym punkcie. Pozostań w okolicy stawu kolanowego w 4 punktach: Wewnątrz z tyłu i z przodu, a następnie na zewnątrz z tyłu oraz z przodu stawu. W przypadku leczenia więzadeł należy pozostawać tylko na przedniej stronie jednak w co najmniej 4 punktach terapeutycznych. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym stawem przez co najmniej 1 min.
5. Pozostań 40-100 sek na każdym punkcie. W okolicy stawu nadgarstkowego w 4-6 miejscach pozostań wokół stawu, aż staw się rozluźni i powierzchnia skóry nie będzie już stwardniała. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym/napiętym stawem przez co najmniej 1 min.
6. Pozostań 1 min na każdym punkcie. Przy ścięgnach i więzadłach w odcinkach około 2 cm, po uszkodzonej stronie co 1 cm prowadzić w dół z tyłu i z dwóch stron ścięgna zginacza. Najintensywniej potraktować uszkodzony fragment ścięgna lub więzadła.
7. Pozostań 1 min na każdym punkcie. W obszarze Os Metacarpale III przesuwaj w odstępach co 2 cm w układzie siatki. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym miejscem przez co najmniej 1 min.
8. Pozostań 1 min na każdym punkcie. W okolicy stawu pęciny w 4-6 miejscach pozostań wokół stawu, aż staw się rozluźni i powierzchnia skóry nie będzie już stwardniała. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym stawem przez co najmniej 1 min.
9. Pozostań 1-2 min na każdym punkcie. Na obszarze kopyta, pozostań w 4-6 miejscach wokół kopyta, od tylnej strony kopyta ponad krawędź korony do przodu, do dolnej krawędzi kopyta. Przy trzeszczkach prowadzić WLP w głąb kopyta. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kopytem przez co najmniej 30-60 sek w każdej strefie terapeutycznej

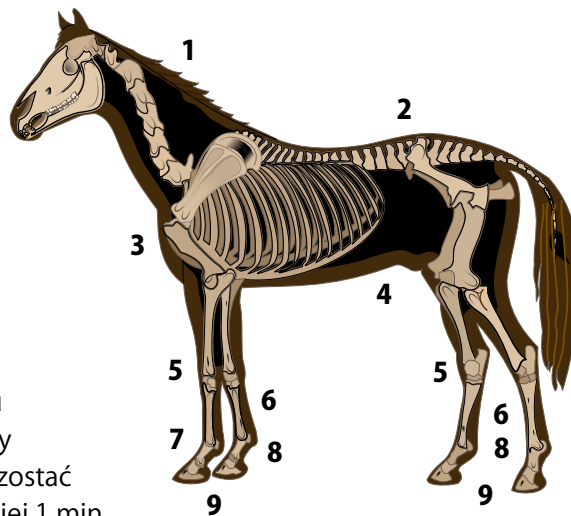

Zalecenia terapii

Połącz terapię WLP z medycyną tradycyjną i terapią polem magnetycznym. Terapii WLP nie należy wykonywać bez porady weterynaryjnej lub terapeutycznej. W przypadku ostrych problemów skonsultuj się z lekarzem weterynarii.



Activo-Med GmbH Polska
ul. Fabryczna 4
58-125 Pszenno

+48 796 333 562
kontakt@activomed.pl

ACTIVOMED

Copyright© Activo-Med GmbH